



RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština


eFOLDi 

Rozložení elektrického křesla eFOLDi

Před zahájením umístěte křeslo na volné prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí.

Rozkládání je jednoduché a s trochou cviku ho zvládnete nastavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám procvíčit si s křeslem Power Chair.

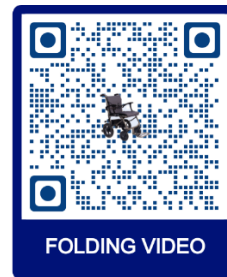

1

Kolečka proti převrácení a nabíječka baterií jsou součástí dodávky vašeho křesla Power Chair.



2

V případě potřeby nainstalujte kola proti převrácení. Ty se jednoduše zatlačí a zajistí na místě.



3

Elektrickou židli rozložte jednoduchým zatlačením spodní části sedadla dolů.



4

Udržujte kabel ovladače mimo místa sevření, jako jsou podpěry loketní opěrky.



5

Nainstalujte podpěry loketních opěrek do štěrbin a zatlačte je dolů, dokud se nezajistí.



6

Vezměte řídicí jednotku a..



7

..vložíte ovládací tyč do úchytu pod loketní opěrkou..



8

..upravte polohu ovladače a utáhněte rýhovaným knoflíkem.



9

Vyjměte ovládání obsluhy ze zadní kapsy a připevněte jej k tyči vzadu.



10

Stáhněte opěrku nohou dolů.



11

Nainstalujte podsedačky podle obrázku. Ty jsou drženy na místě pomocí suchých zipů..



12

..ujistěte se, že jsou složeno přes opěradlo a pod sedadlem. Power Chair je nyní připraven.

kládací elektrické křeslo eFOLDi

		
1 Mírně povolte rýhovaný knoflík a vyjměte ovladač.	2 umístěte ovladač a pás bezpečnostního pásu na sedadlo.	3 Odstraňte ovládání obsluhy a umístěte jej do kapsy na zadní straně židle.
		
4 Ujistěte se, že jsou obě loketní opěrky nastaveny v nejvyšší poloze.	5 ... stisknutím malého stříbrného tlačítka pro nastavení područek.	6 Zkontrolujte, zda jsou přední kola umístěna dopředu, aby bylo zajištěno hladké skládání. Tipem zatáhněte za židli dozadu, abyste vyrovnali kola
		
7 Poté sáhněte pod okraj sedadla a vytáhněte uvolňovací tyč nahoru, abyste sedadlo uvolnili a...	8 ... vytáhněte sedadlo nahoru a složte elektrické křeslo.	9 Sklopte opěrku nohou.

Provoz elektrického křesla eFOLDi

		
Baterie lze vyjmout stisknutím červeného jazýčku nahoru a zatažením dozadu.	Zde zapnete hlavní napájení, které napájí ovladač sluchátka. Toto vždy vypněte, když křeslo nepoužíváte, abyste šetřili energii baterie.	Zapněte ovladač sluchátka. Ovladač sluchátka má tlačítka pro nastavení rychlosti a displeje indikující zbývající energii a nastavení rychlosti

Upozorňujeme, že tento leták má sloužit pouze jako rychlý průvodce. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k produktu. Jakékoli dotazy, zavolejte nám na číslo 0800 915 0800 nebo napište e-mail na adresu services@efoldi.com